

## **SEDIA DA VASCA O DOCCIA PER PAZIENTI BARIATRICI**

### **Ref. AB-29B**



### **Descrizione**

Sedia da doccia o vasca con struttura in alluminio regolabile in altezza. Seduta ergonomica in polietilene con fori per il deflusso dell'acqua. Maniglia laterale e piedini in gomma antiscivolo. Schienale in polietilene con presa. Grazie alla larghezza della seduta, che permette di scivolare sulla stessa stando in posizione seduta ed alla regolazione in altezza, permette di entrare facilmente anche nella vasca.

**ATTENZIONE: i lati dove applicare lo schienale e la maniglia, sono da scegliere a seconda delle necessità dell'utente, per l'ingresso nella vasca.**

### **Destinazione d'uso**

Ausilio per agevolare le funzioni di igiene personale destinato a pazienti obesi con difficoltà o limitate capacità motorie.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

INTERMED S.r.l. via Ludovico d'Aragona, 11 • 20132 - Milano (MI) • Cod. Fisc/P. IVA 11703230158  
Telefono +39 02.98248016 • Fax +39 02.98247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A Mi 1494142


Organizzazione con sistema di gestione  
qualità aziendale certificato:  
UNI CEI EN ISO 13485:2016

## Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y093303	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	1708996/R	
Codice Nomenclatore Tariffario	n/d	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2018	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

### Caratteristiche Tecniche

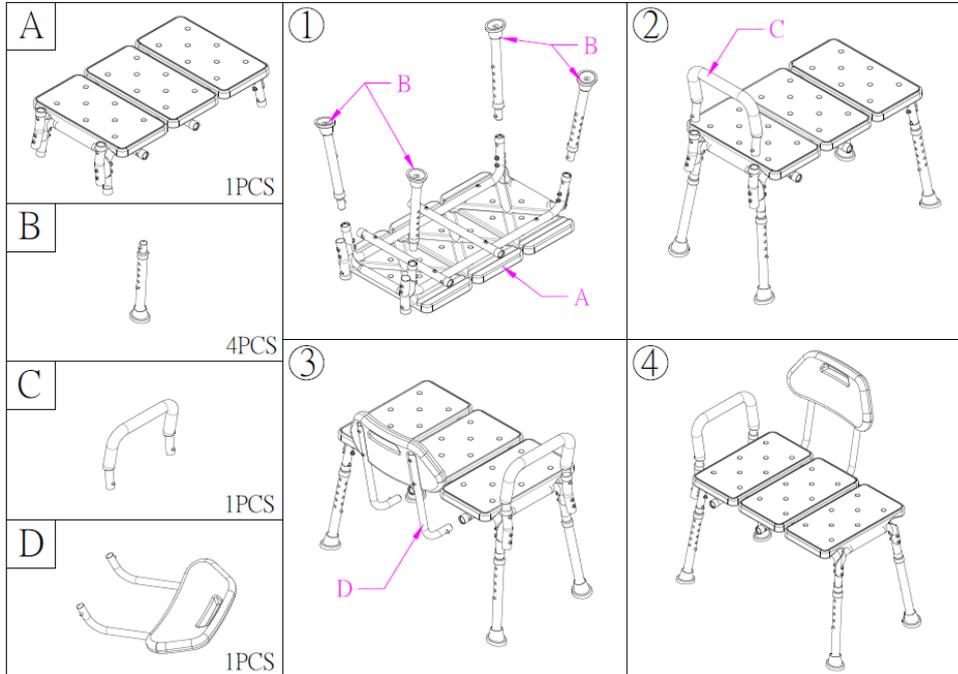

Altezza	da 49 a 59 cm
Dimensioni seduta	41 x 66 cm
Dimensioni schienale	24 x 41 cm
Ingombro della base	75 x 46 cm
Materiale	Struttura di supporto in Alluminio anodizzato, Seduta e schienale in polietilene, Puntali in gomma antiscivolo.
Peso	6,4 Kg
Portata	225 Kg

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

## Informazioni utili

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detersivi neutri. Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive. Disinfettare con normali sostanze a base alcolica. Verificare periodicamente l'usura e la tenuta dei puntali in gomma. In caso di eccessivo deterioramento procedere alla sostituzione.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AB-29B	Sedia da doccia	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

## Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
0.0	05/06/2016	Prima emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.



Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.