Linea LUX- MANIGLIONI RIBALTABILI PER BAGNO

Ref. AB-60x/AB-70x/AB-80x



Descrizione

I maniglioni ribaltabili della linea LUX consentono all'utente di aumentare l'indipendenza e la stabilità durante l'uso quotidiano del bagno o, nello specifico, del wc. Funzionano come un sostegno robusto e sicuro, alla quale l'utilizzatore può aggrapparsi per scaricare parte del peso corporeo dalle gambe, riducendo l'affaticamento muscolare, dovuto alla posizione eretta, così come il rischio di scivolare e di infortunio. Dopo l'uso, la barra ribaltabile può essere facilmente rimessa in posizione verticale e bloccata grazie al suo gancio di sicurezza, evitando cadute accidentali della barra in posizione orizzontale. La barra ribaltabile è disponibile in diversi materiali e lunghezze e, grazie ai meccanismi di ribaltamento e bloccaggio, è adatta anche per bagni compatti. La barra ribaltabile può essere dotata di portarotolo, così che quest'ultimo sia in una posizione più accessibile, evitando movimenti di torsione della colonna vertebrale per prenderlo.

Destinazione d'uso

Ausilio per la cura e l'igiene personale destinato a pazienti con difficoltà o limitazioni motorie.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	☑ SI	☐ NO
Codice CND	Y181806	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	AB-60/B 2794021/R AB-60/N 2794010/R AB-60/I 2794019/R AB-60/S 2794017/R AB-70/B 2794027/R AB-70/N 2794022/R AB-70/I 2794026/R AB-70/S 2794025/R AB-80/B 2794034/R	

Intermed S.r.l. via Ludovico d'Aragona, 11 • 20132 Milano (MI) • C. F./P. IVA 11703230158
Tel. +39 02.98248016 • Fax +39 02.98247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

ACCREDIA L'ENTE DI ACCREDITAMENTO
kiwa certified CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
UNI EN ISO 13485:2016

	AB-80/N 2794028/R AB-80/I 2794031/R AB-80/S 2794030/R	
Identificativo di registrazione EUDAMED	Non ancora rilasciato	
Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	☑ SI	☐ NO
Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745	☑ I ☐ Im ☐ Is ☐ IIa ☐ IIb ☐ III	
Marcatura CE	☑ SI	☐ NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	☑ SI	☐ NO
Ente Certificatore	☐ SI	☑ NO
Sterile	☐ SI	☑ NO
Latex Free	☑ SI	☐ NO
Anno immissione in commercio	2021	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
SRN Fabbricante	IT-MF-000013039	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

IDENTIFICAZIONE UDI

BASIC UDI-DI	805267997AUSILIBAGNOS5


Codice Ref.	UDI-DI
AB-60/N	8052679977864
AB-60/S	8052679977925
AB-60/I	8052679977895
AB-60/B	8052679977833
AB-70/N	8052679977871
AB-70/S	8052679977932
AB-70/I	8052679977901
AB-70/B	8052679977840
AB-80/N	8052679977888
AB-80/S	8052679977949
AB-80/I	8052679977918
AB-80/B	8052679977857

Intermed S.r.l. via Ludovico d'Aragona, 11 • 20132 Milano (MI) • C. F./P. IVA 11703230158
Tel. +39 02.98248016 • Fax +39 02.98247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Caratteristiche Tecniche

Modello	Lunghezza x Altezza
AB-60/B Acciaio Bianco	60 x 19 cm
AB-60/N Acciaio Nero	60 x 19 cm
AB-60/I Acciaio Inox	60 x 19 cm
AB-60/S Acciaio Satinato	60 x 19 cm
AB-70/B Acciaio Bianco	70 x 19 cm
AB-70/N Acciaio Nero	70 x 19 cm
AB-70/I Acciaio Inox	70 x 19 cm
AB-70/S Acciaio Satinato	70 x 19 cm
AB-80/B Acciaio Bianco	80 x 19 cm
AB-80/N Acciaio Nero	80 x 19 cm
AB-80/I Acciaio Inox	80 x 19 cm
AB-80/S Acciaio Satinato	80 x 19 cm

Dettaglio ingombri e misure

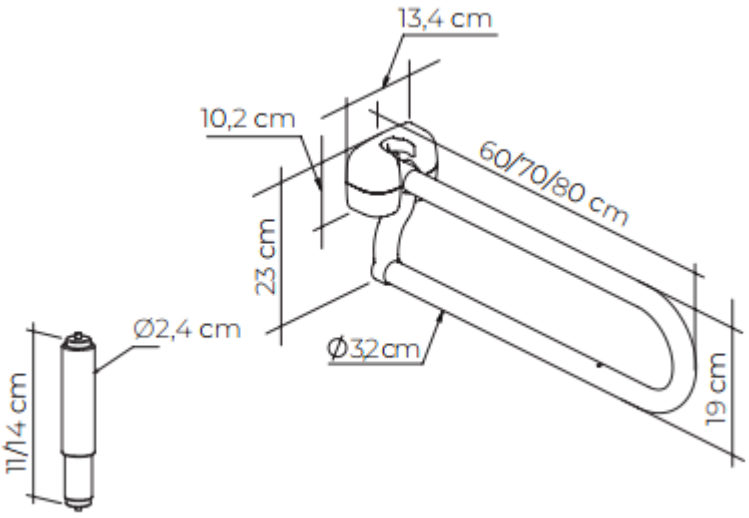

Portarotoli a richiesta



AB-8 B **AB-8N** **AB-8I** **AB-8S**

M4.2-03 Rev.5 03/06/2021

Informazioni utili

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive. Disinfettare con normali sostanze a base alcolica. In caso di eccessivo deterioramento procedere alla sostituzione.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
**AB-xx/x	Maniglione ribaltabile	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

****All'interno della confezione, il maniglione nel colore e versione richiesto.**

Accessori a richiesta

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AB-8B	Portarotolo bianco	1
AB-8N	Portarotolo nero	1
AB-8I	Portarotolo inox	1
AB-8S	Portarotolo satinato	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	28/05/2024	Nuova emissione scheda tecnica per aggiornamento normativo.

CE

Intermed S.r.l. via Ludovico d'Aragona, 11 • 20132 Milano (MI) • C. F./P. IVA 11703230158
Tel. +39 02.98248016 • Fax +39 02.98247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

ACCREDIA L'ENTE DI ACCREDITAMENTO
kiwa certified CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
UNI EN ISO 13485:2016