

## CUSCINO POSIZIONATORE – POZ'IN'FORM

*Ref. CP-xx*

### Descrizione

Cuscini posizionatori per la prevenzione delle piaghe da decubito realizzati in fibra viscoelastica Micromax inserita in un tessuto a trama sottile con micropori e una fodera Pharmatex.

Le caratteristiche della fibra, combinate alla massima traspirabilità della fodera, garantiscono un sostegno ottimale delle parti in appoggio, favorendo una migliore distribuzione delle pressioni di contatto.

Poz'in'Form garantisce un posizionamento efficace e confortevole nel tempo. Le fibre lunghe impediscono, infatti, gli effetti dello scivolamento e prevengono qualsiasi deterioramento prematuro del supporto.

La diversità di forme, la gamma di taglie e il numero degli elementi di Poz'in'Form offrono una varietà significativa di combinazioni.

Il comfort e la qualità dei cuscini posizionatori consentono al paziente una migliore postura, una diminuzione dei rischi di piaghe da decubito e, in determinate situazioni, una riduzione dei rischi di infezione.

Gli elementi Poz'in'Form sono rivestiti con fodere Pharmatex.

#### Fodera Pharmatex

- Bi-elastica
- Antibatterica e disinfettabile
- Resistente all'acqua
- Resistente al fuoco
- Traspirante
- Rimovibile e lavabile
- OEKO-TEX® Standard 100

#### Microfibra Micromax

- Fibra viscoelastica
- Distribuisce le pressioni di contatto
- Riduce attriti e forze di taglio
- Comoda
- Traspirante
- Lavabile
- Durevole

### Destinazione d'uso

Cuscini posizionatori per applicazioni differenziate. Permettono di sistemare in posizione ottimale le parti del corpo, diminuendo i rischi di formazione di piaghe da decubito e favorendo posture più corrette.

Ideali per applicazioni in ambito ospedaliero e domiciliare.




## Identificazione prodotto





Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y033303	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	Ref. CP-01	1464556/R
	Ref. CP-02	1466235/R
	Ref. CP-03	1466236/R
	Ref. CP-10	1466237/R
	Ref. CP-20	1466238/R
	Ref. CP-30	1466239/R
	Ref. CP-40	1466240/R
	Ref. CP-50	1466241/R
	Ref. CP-60	1466242/R
	Ref. CP-65	1466243/R
	Ref. CP-70	1466244/R
	Ref. CP-80	1466245/R
	Ref. CP-85	1466246/R
	Ref. CP-90	1466247/R
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico – 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Altri standard di riferimento	NF EN 597-1 ; NF EN 597-2 ; BS 7175	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore MDD	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2012 (Intermed)	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	PHARMA OUEST INDUSTRIES	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

## Caratteristiche Tecniche



<p>Ref. CP-01 Posizionatore universale. Aiuta il paziente a mantenere una posizione ottimale riducendo i rischi derivanti da decubito e da posture scorrette.</p> <p>Dimensioni: 35 x 25 cm</p>	
<p>Ref. CP-02 Posizionatore universale. Può essere usato per la flessione del ginocchio e una moderata abduzione dell'anca.</p> <p>Dimensioni: 55 x 40 cm</p>	
<p>Ref. CP-03 Posizionatore universale. Aiuta il paziente a mantenere una posizione ottimale riducendo i rischi derivanti da decubito e da posture scorrette.</p> <p>Dimensioni: 40 x 15 cm</p>	


Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

<p>Ref. CP-10 Posizionatore triangolare. Si adatta a tutte le morfologie. Posizionato sotto il ginocchio, supporta l'articolazione, previene il paziente dallo scivolamento e riduce gli effetti derivanti da attriti e forze di taglio nell'area del sacro. Può essere usato nella posizione di Fowler e aiuta a mantenere una posizione corretta mentre distribuisce le pressioni dalle aree più sensibili (sacro, tuberosità ischiatiche, tallone) ad aree a basso rischio (polpacci, cosce).</p> <p>Dimensioni: 56 x 32 x 28 cm</p>	
<p>Ref. CP-20 Posizionatore a mezza luna. In posizione supina o di Fowler, questo cuscino supporta e mantiene la schiena nella posizione corretta. Può essere anche usato su carrozzine.</p> <p>Dimensioni: 200 x 30 cm</p>	
<p>Ref. CP-30 Posizionatore decubito laterale. Utilizzabile in diversi modi, sostiene comodamente le spalle, la schiena, le anche e le ginocchia quando il paziente è disteso lateralmente. Dunque riduce gli effetti derivanti da attriti e forze di taglio.</p> <p>Dimensioni: 185 x 35 cm</p>	

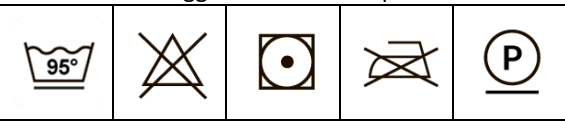
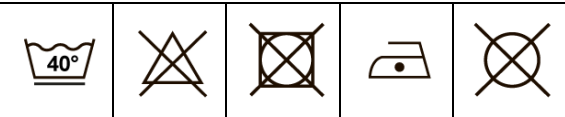
<p>Ref. CP-40 Posizionatore cilindrico. Posizionato tra le gambe, riduce gli effetti derivanti da attriti e forze di taglio nelle aree delle ginocchia e delle cosce. Può essere usato anche sotto le caviglie per distribuire le pressioni.</p> <p>Dimensioni: 75 cm x (∅ 18 cm)</p>	
<p>Ref. CP-50 Posizionatore abduttore. Utilizzato nella zona inguinale quando il paziente è disteso, per mantenere le gambe abdotte e le gambe separate per ridurre gli effetti derivanti da attriti e forze di taglio tra le gambe, sulla parte superiore delle ginocchia e sui polpacci.</p> <p>Dimensioni: 35 x 10 x 30 x 15 cm</p>	
<p>Ref. CP-60 Posizionatore semicircolare. In combinazione con il cuscino cilindrico, riduce gli effetti derivanti da attriti e forze di taglio tra le gambe, sulla parte superiore delle ginocchia e sulle cosce. Mantiene le anche abdotte. Può essere usato anche sotto il collo.</p> <p>Dimensioni: 105 x 20 cm</p>	
<p>Ref. CP-65 Posizionatore circolare aperto. Può essere usato in aggiunta al cuscino universale, triangolare o cilindrico per supportare la corretta postura. Posizionato intorno al collo, questo cuscino supporta la testa del paziente.</p> <p>Dimensioni: 135 x 20 cm</p>	

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

<p>Ref. CP-70 Posizionatore scarico due talloni. È posizionato ai piedi del letto e fissato con un nastro regolabile. La pressione sui talloni è completamente scaricata. Questo cuscino mantiene le caviglie in posizione corretta.</p> <p>Dimensioni: 85 x 25 cm</p>	
<p>Ref. CP-80 Posizionatore scarico mano. Riduce la pressione sulla pelle nelle zone a maggior rischio di decubito. È consigliabile dopo operazioni chirurgiche. Consente lo scarico dei gomiti e sollievo sui polsi.</p> <p>Dimensioni: 45 x 23 x 8,5 cm</p>	
<p>Ref. CP-85 Posizionatore scarico tallone. Questo cuscino contribuisce a distribuire le pressioni di contatto dalle zone a maggior rischio a quello di minor rischio (polpacci e ginocchia). Il tallone è completamente fuori dal materasso e il peso della parte inferiore della gamba è distribuito lungo il cuscino. Il cuscino mantiene le caviglie in posizione corretta e porta ad una migliore circolazione sanguigna. La sua dimensione consente una distribuzione delle pressioni sul tallone di Achille.</p> <p>Dimensioni: 48 x 30 x 12 cm</p>	

<p>Ref. CP-90          Posizionatore scarico occipitale.          Assicura una corretta posizione e una distribuzione delle pressioni nell'area occipitale.          La combinazione della microfibra e della memoria di forma consente un regoalre sollievo sulle zone di contatto.</p> <p>Dimensioni:          50 x 40 x 9 cm</p>	
<b>Materiali</b>	Tasca in tessuto microareato 100% Poliestere. Imbottitura in microfibra 100% Poliestere. Fodera 50% Poliuretano - 50% Poliestere.
<b>Grammatura (fodera)</b>	205 g/m <sup>2</sup>
<b>Resistenza al fuoco</b>	BS 7175 - Crib 5 (fodera). EN 597-1 e EN-597-2 (fodera e cuscino).

### Informazioni utili\*

<b>CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE</b>	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza.
<b>CONSERVAZIONE</b>	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
<b>MANUTENZIONE E PULIZIA</b>	<p><b>Fodera bi-elastica Pharmatex:</b>          lavabile alla temperatura massima di 95°C.          Non candeggiare.          Non stirare.          Possibilità di lavaggio a secco a temperature moderate.</p> <div data-bbox="794 1473 1361 1592" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  </div> <p><b>Tessuto microareato e componente microfibra:</b>          lavabile alla temperatura massima di 40°C.          Non candeggiare. Non stirare.          Non usare asciugabiancheria.</p> <div data-bbox="794 1753 1361 1868" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  </div>
<b>MODALITÀ DI SMALTIMENTO</b>	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

\*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

## Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
CP-xx**	Cuscino posizionale Poz'in'Form con fodera Pharmatex	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

\*\*La confezione contiene una sola tipologia di cuscino a seconda del codice prodotto scelto.

## Accessori opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
nd	nd	nd

## Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Nuova emissione della scheda tecnica.
1.1	11/09/2018	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.

