

## REHABASK CARROZZINA BASCULANTE POLIFUNZIONALE

**Ref. REHABK-xx**



"La configurazione dell'ausilio, mostrata nella foto con ruote posteriori da 12", è completa di accessori opzionali ed è puramente indicativa."

### Descrizion

REHABK è una carrozzina basculante polifunzionale con telaio in acciaio, robusta e leggera.

Disponibile in tre misure di larghezza seduta, ognuna regolabile fino a +5 cm.

Ruote posteriori con diametro a scelta da 12", 16" o 24", tutte dotate di freno a tamburo, con leve di azionamento per l'accompagnatore sulle impugnature di spinta e sono ad estrazione rapida.

Il sistema basculante, permette di rimanere stabile a prescindere dalle inclinazioni dello schienale e della seduta che sono regolati da pistoni a gas.

REHABK è dotata in configurazione base di tutti gli elementi essenziali per il comfort e la sicurezza dell'utente:

- rivestimento bi-elasticizzato e traspirante;
- schienale con cuscino completamente amovibile e tela con cinghie regolabili;
- inclinazione poggia-gambe regolabile con pistoni a gas, con contenimenti ginocchia e cuscini poggia-polpacci regolabili in profondità e larghezza;
- pedane regolabili in flesso-estensione e altezza;
- imbottitura anatomica per seduta e schienale;
- poggia-testa regolabile in diverse posizioni;
- braccioli regolabili in altezza dotati di imbottitura lunga e anatomica;
- ruote posteriori antiribaltamento.

- Freni a tamburo su tutte le misure di ruote posteriori 12", 16" e 24"

A richiesta, sono disponibili come accessori migliorativi: cuneo divaricatore, supporti laterali per il tronco e tavolino con incavo.

### Destinazione d'uso

Carrozzine indicate per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, presentano riduzione della mobilità.

**Intermed S.r.l.** via Ludovico d'Aragona, 11 • 20132 Milano (MI) • C. F./P. IVA 11703230158

Tel. +39 02.98248016 • Fax +39 02.98247361 • [info@intermeditalia.it](mailto:info@intermeditalia.it) • [www.intermeditalia.it](http://www.intermeditalia.it)

Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142



## Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y180918 Y180980 (accessori)	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	REHABK-38-12 REHABK-38-16 REHABK-38-24 REHABK-43-12 REHABK-43-16 REHABK-43-24 REHABK-48-12 REHABK-48-16 REHABK-48-24 REHABK-A01 REHABK-A02 REHABK-A03	2913491/R 2913500/R 2913506/R 2913510/R 2913513/R 2913514/R 2913516/R 2913518/R 2913519/R 2913523/R 2913526/R 2913531/R
Codice Nomenclatore Tariffario	12.22.18.012	
Identificativo di registrazione EUDAMED	Non ancora rilasciato	
Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore MDD	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2025 (Intermed)	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
SRN Fabbriante	IT-MF-000013039	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

## IDENTIFICAZIONE UDI

BASIC UDI-DI	805267997CARROZZINE25
--------------	-----------------------

Codice Ref.	UDI-DI
REHABK-38-12	8056992232211
REHABK-38-16	8056992232228
REHABK-38-24	8056992232235
REHABK-43-12	8056992232242
REHABK-43-16	8056992232259
REHABK-43-24	8056992232266

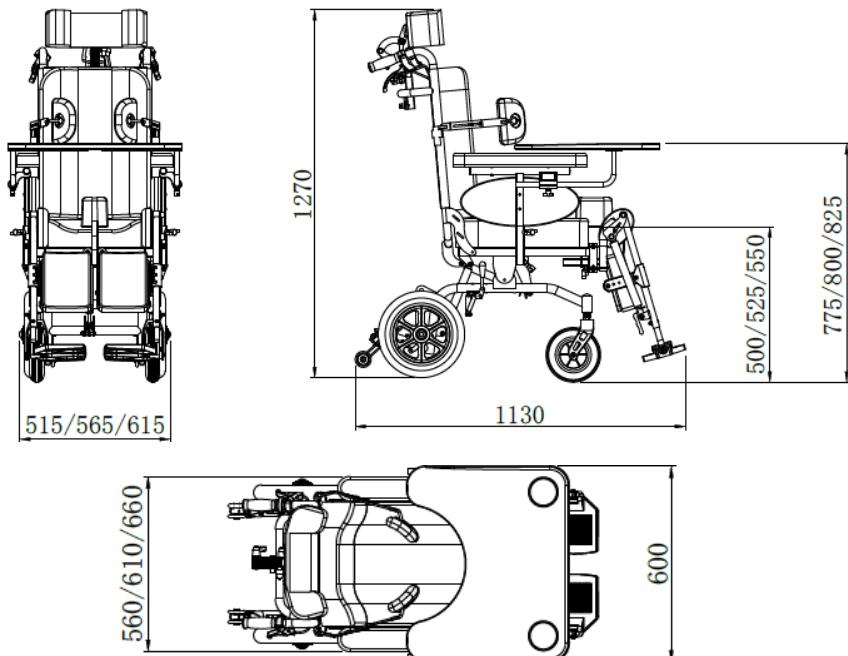
REHABK-48-12	8056992232273
REHABK-48-16	8056992232280
REHABK-48-24	8056992232297

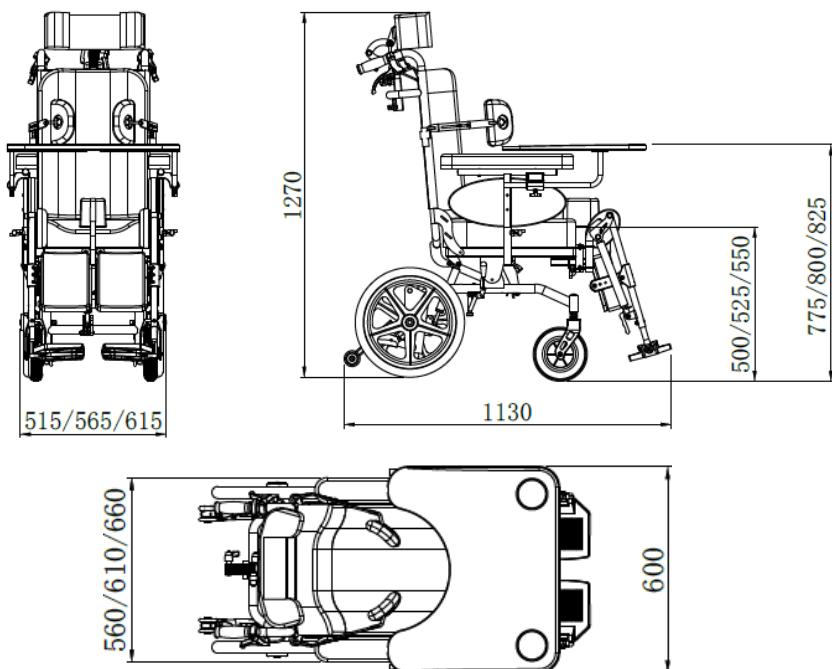
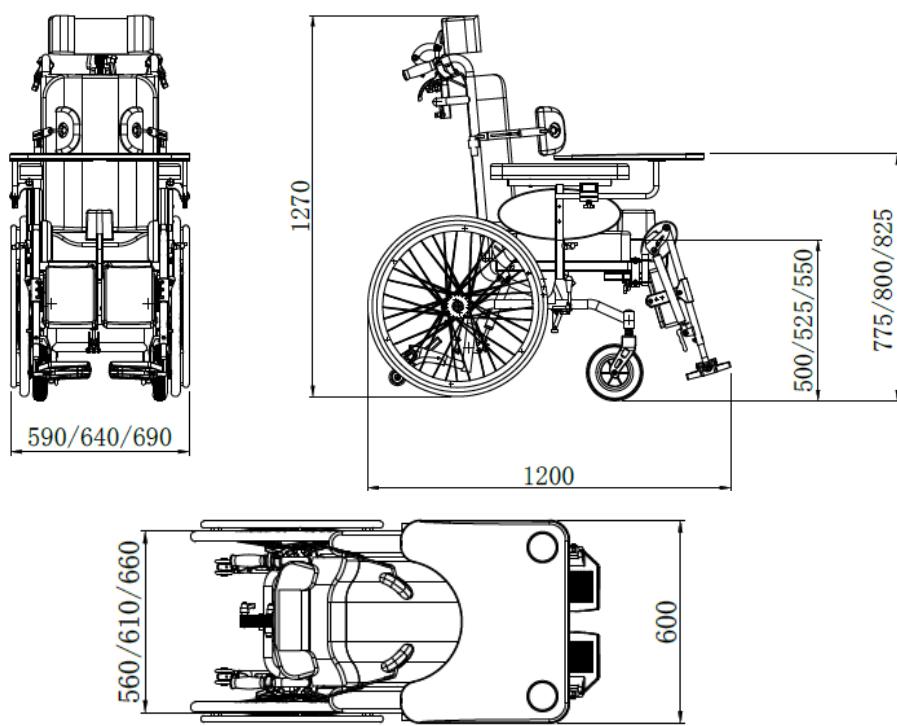
## Codice variante

REF.	DESCRIZIONE
REHABK-38-12	Carrozzina basculante polifunzionale, misura 38 ruote da 12"
REHABK-38-16	Carrozzina basculante polifunzionale, misura 38 ruote da 16"
REHABK-38-24	Carrozzina basculante polifunzionale, misura 38 ruote da 24"
REHABK-43-12	Carrozzina basculante polifunzionale, misura 43 ruote da 12"
REHABK-43-16	Carrozzina basculante polifunzionale, misura 43 ruote da 16"
REHABK-43-24	Carrozzina basculante polifunzionale, misura 43 ruote da 24"
REHABK-48-12	Carrozzina basculante polifunzionale, misura 48 ruote da 12"
REHABK-48-16	Carrozzina basculante polifunzionale, misura 48 ruote da 16"
REHABK-48-24	Carrozzina basculante polifunzionale, misura 48 ruote da 24"

## Misure ingombri (mm)

REHABK-xx-12	Misura seduta 380, 430, 480 mm
--------------	--------------------------------



**REHABK-xx-16**
**Misura seduta 380, 430, 480 mm**

**REHABK-xx-24**
**Misura seduta 380, 430, 480 mm**


## Caratteristiche Tecniche

Materiali	Telaio in acciaio. Rivestimenti imbottiture in Dartex bi-elastico Imbottiture in PU espanso Copertoni in PU pieno Poggia-piedi in platica
Peso	≥ 34,2 kg (variabile secondo modello e misura)
Portata	140 kg

## Informazioni utili\*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Per mantenere l'efficienza del dispositivo e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti. Pulire con panno morbido utilizzando detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide né spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

\*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

## Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
**REHABK	Carrozzina basculante polifunzionale.	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo.	1

\*\*Codice variante a seconda della misura e del modello di carrozzina scelta.

## Accessori opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
REHABK-A03	Tavolino con incavo	1
REHABK-A02	Cuneo abduttore	1
REHABK-A01	Spinte tronco laterali (paio)	1
19/15	Cintura addominale a bretella	1
20/15	Cintura addominale semplice	1
21/15	Cintura pelvica	1

## Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	21/04/2025	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
1.1	17/11/2025	Registrazione ministeriale

